


Gather supplies before starting the steps below.

SenSura™ 1-piece Pouch


Pictorial Instructions for Use



Preparation

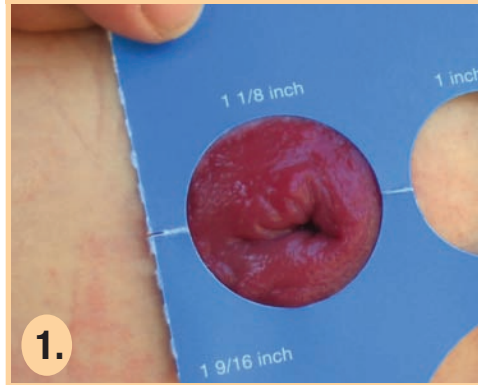


1. Measure the stoma.

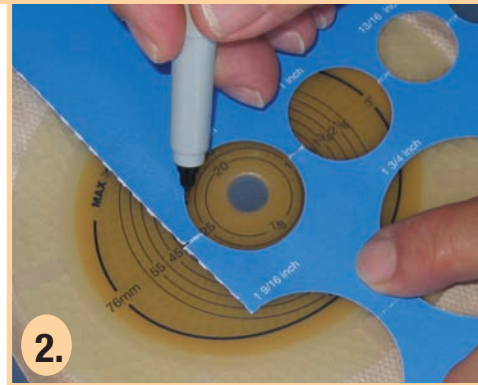

2. Trace measurement
onto back of the barrier.



3. Cut opening in the barrier.

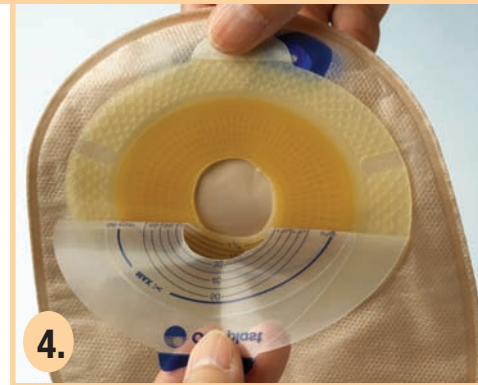

4. Remove protective backing by pulling the blue release tab away from the barrier.

Application



1. Apply pouch
by centering barrier around stoma.



2. Secure to skin
by applying gentle pressure.

Emptying the pouch



1. Open the outlet
by lifting both tabs off the Velcro® plate. Unfold outlet.



2. Fold back lower plate to
avoid soiling when emptying.
Attach Velcro® dots to hold
plate in place.

Emptying the pouch cont.




3. Empty pouch
by pinching outer edges of
the outlet open.



4. Clean the outlet.

Closing the pouch

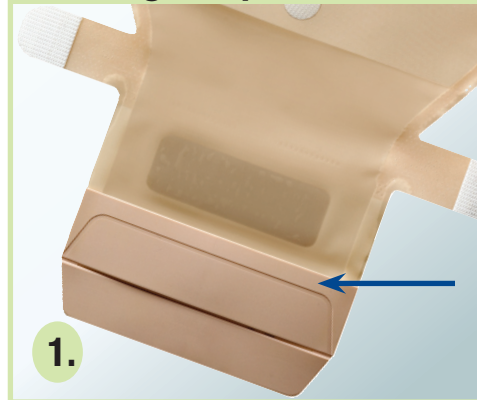

1. Release the Velcro® dots.
Using the guide, fold the
lower plate over the upper
plate.



2. Fold upwards.
Seal the outlet by attaching
the Velcro® hook tabs onto
the Velcro® plate.




3. Hide-Away:
Tuck sealed outlet up and
under the protective pocket.

Removal



1. To remove,
use the white tab on the
barrier to gently pull the
pouch away from the skin.

For product support call the Consumer Specialist Group at 1-888-726-7872.

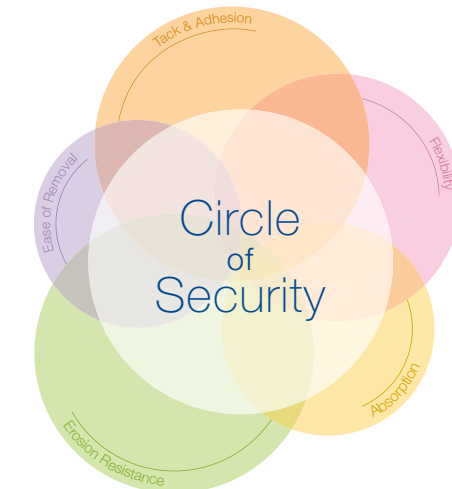

Coloplast Corp.
Minneapolis, MN 55411
Phone: 888-726-7872
usmedweb@coloplast.com
www.us.coloplast.com
www.coloplast.com

M1331N - 05/07

Coloplast® is a registered trademark of Coloplast A/S or related companies.
SenSura™ is a trademark of Coloplast A/S or related companies.
© 2007 Coloplast Corp. All rights reserved.
VELCRO® is a registered trademark of Velcro Industries B.V.


Nota: Reúna todos los suministros antes de comenzar a seguir los pasos que se detallan a continuación.

Bolsas colectoras SenSura de 1 pieza


Instrucciones ilustradas para su uso



Preparación

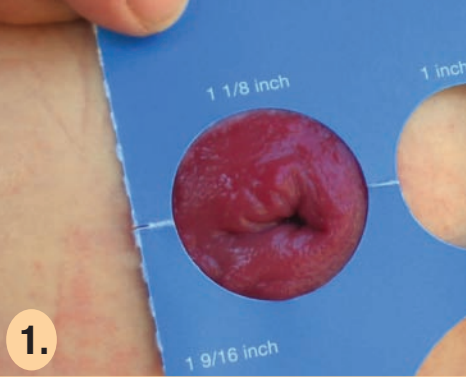

1. Mida el estoma.

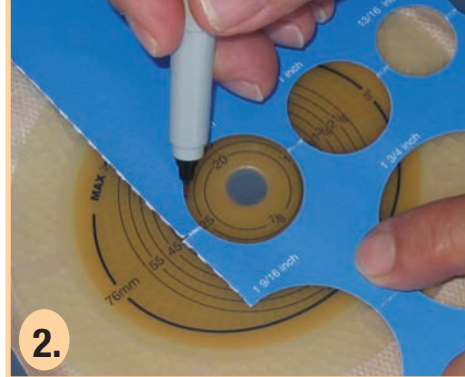

2. Trace la medida del estoma sobre la parte trasera de la barrera



3. Corte la abertura en la barrera.



4. Retire el forro protector jalando la lengüeta azul de desprendimiento.

Colocación



1. Coloque la bolsa centrando la barrera alrededor del estoma.



2. Adhiérala a la piel ejerciendo una presión suave y administrando calor.

Para vaciar la bolsa



1. Abre el orificio de la salida. Desprenda las dos lengüetas de la placa de Velcro. Desdoble el orificio de salida y póngalo en posición para vaciar el contenido.



2. Doble hacia atrás la placa inferior para evitar que se manche mientras se vacía la bolsa. Los dos puntos de Velcro sostendrán la placa en su lugar.

Para vaciar la bolsa




3. Vacíe la bolsa apretando los bordes de la salida para abrirla.



4. Limpie la abertura con papel higiénico.

Para cerrar la bolsa

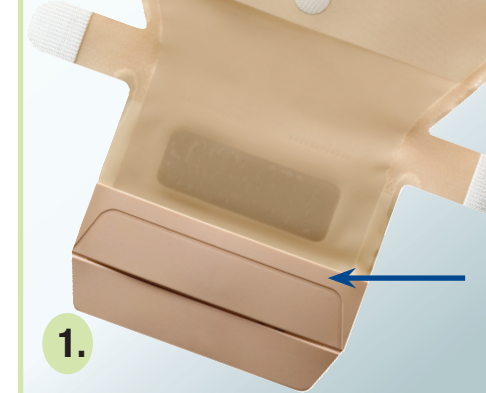

1. Desenganche los puntos de Velcro que sostienen la placa inferior doblada hacia atrás. Use la guía y doble la placa inferior sobre la placa superior más grande, como si estuviera sellando un sobre.



2. Enrolle y cierre el orificio de salida doblando las lengüetas Velcro de enganche encima de la placa de Velcro.




3. Doble la salida cerrada hacia arriba para esconderla dentro del bolsillo protector.

Para retirar la bolsa



1. Para retirar la bolsa, use la lengüeta blanca que está en el adhesivo para ir desprendiendo suavemente la bolsa de la piel.

Para pedir asistencia sobre el producto, llame a nuestro Grupo de Especialistas para el Consumidor al teléfono 1-888-726-7872.

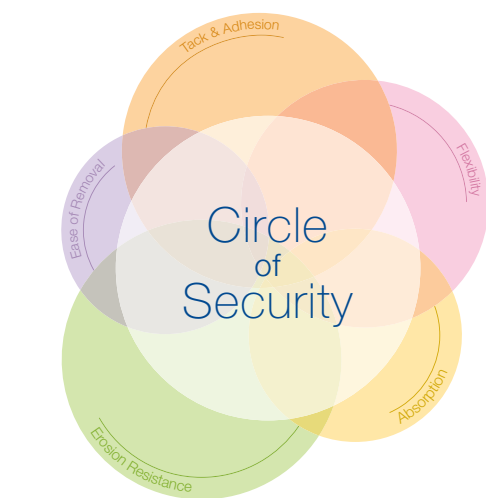

Coloplast
Coloplast Corp.
Minneapolis, MN 55411
Phone: 888-726-7872
usmedweb@coloplast.com
www.us.coloplast.com
www.coloplast.com
M1331N - 05/07

Coloplast® es una marca registrada de Coloplast A/S o compañías relacionadas. **Easyclose™** y **SenSura™** son marcas registradas de Coloplast A/S o compañías relacionadas. 2007 Coloplast Corp. Todos los derechos están reservados. **Velcro®** es una marca registrada de Velcro Industries BV.