

[www.drivemedical.com](http://www.drivemedical.com)

drive  
[www.DRIVEMEDICAL.COM](http://www.DRIVEMEDICAL.COM)

travel walker  
with 5" wheels and glides

andador de viaje  
con ruedas de 5" y deslizador

voyagez le promeneur  
avec 5" roues et plane




EU Authorized Representative  
Drive Medical LTD  
Ainley's Industrial Estate  
Elland, West Yorkshire,  
United Kingdom HX5 9JP

[www.drivemedical.com](http://www.drivemedical.com)

drive  
[www.DRIVEMEDICAL.COM](http://www.DRIVEMEDICAL.COM)

# walker instructions

Easy “pull up” trigger release  
for opening and closing

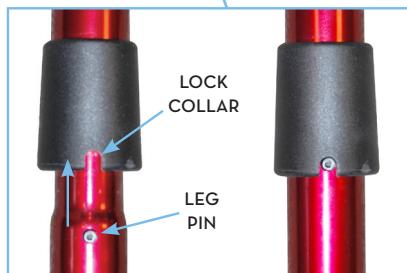


## IMPORTANT SAFETY NOTICE:

Your walker features flip up legs that can be attached to the frame of the walker for easy storage. Be sure that when the legs are turned down for use as a walker, the leg pin is inserted into the lock collar as shown above.

# custom walker adjustments

With your arm extended down,  
handle should be at wrist height.

With your hand placed on  
the hand-grip, your elbow  
should be flexed 20° - 30°.

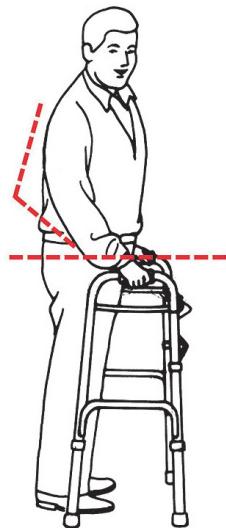

## CAUTION:

Be aware of the following:


- Electrical cords in way
- Liquids on floor
- Throw rugs
- Toys or debris
- Furniture
- Doors and door steps
- Gaps in floor

## WARNING:

1. Use wheels on front legs only or on all four legs with appropriate rear wheel brakes.
2. Do not push one side of the walker ahead and then other side without lifting the walker first.
3. Use Drive accessories only. Use of other manufacturers' accessories can result in improper fit and risk fall and/or injury.
4. Do not use on stairs or escalators.

## wheelchair to walker transfer


Making certain wheels on the wheelchair are locked lift your body by pushing down on the armrests and carefully transfer one hand at time to the walker.

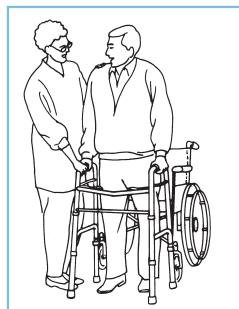

## wheelchair to walker transfer

(with lower extremity injury to right leg or foot)

Making certain wheels on the wheelchair are locked, lift your body by pushing down on the armrests and carefully transferring first the left hand, then the right hand to the walker. (If injury to left leg or foot transfer the right hand first, followed by left.)

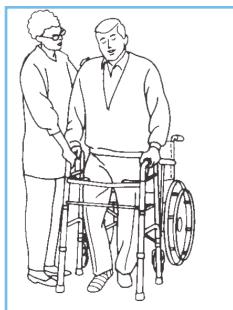

## three-point gait

(for walking with walker)

### Step 1

Align the middle of your foot with the back legs of the walker.



### Step 2

Lift the walker up and place it comfortably in front of you, making sure all four legs end up on the floor.




### Step 2

Carefully, walk forward one step at a time.



## instrucciones para el andador

Gatillo que se “levanta hacia arriba”  
fácilmente para abrir o cerrar.

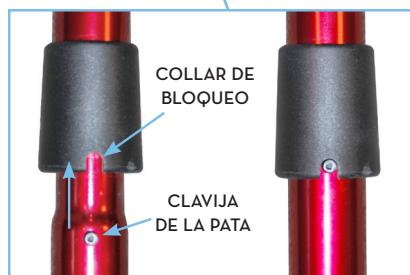


### AVISO IMPORTANTE DE SEGURIDAD:

Su andador cuenta con patas plegables que pueden fijarse a la estructura del andador para fácil almacenamiento. Asegúrese que cuando las patas estén hacia abajo para usar el andador, la clavija de la pata esté asegurada dentro del collar de bloqueo como se muestra arriba.

## ajustes personalizados del andador

Con su brazo extendido hacia abajo,  
el mango debe de estar a la altura  
de su puño. Con su mano colocada  
sobre el mango, su codo debe  
estar flexionado entre 20  
a 30 grados.

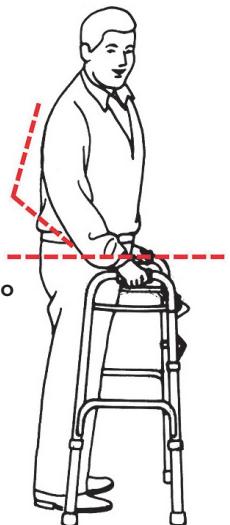

### PRECAUCIÓN:

Tenga cuidado de lo siguiente:

- Cables eléctricos en su camino
- Líquidos sobre el piso
- Cobertores
- Juguetes o basura
- Muebles
- Puertas y escalones
- Grietas en el suelo

### ADVERTENCIA:

1. Utilice las ruedas en las patas del frente o utilícelas en las cuatro patas con los frenos de las ruedas traseras correspondientes.
2. No empuje un lado del andador hacia adelante y luego el otro lado sin primero levantar el andador.
3. Utilice solamente refacciones Drive. El uso de refacciones de otros fabricantes puede resultar en un ajuste inadecuado y en el riesgo de caídas y/o lesiones.
4. No lo utilice sobre escaleras o escaleras mecánicas.

## cambiándose de la silla de ruedas al andador


Asegurándose que el candado de las ruedas de la silla de ruedas esté activado, levante su cuerpo al apoyarse de los descansabrazos y con cuidado transfiera una mano a la vez hacia el andador.



## cambiándose de la silla de ruedas al andador

(con una lesión en la extremidad inferior de la pierna o pie derecho)

Asegurándose que el candado de las ruedas de la silla de ruedas esté activado, levante su cuerpo al apoyarse de los descansabrazos y con cuidado transfiera primero la mano izquierda y luego la mano derecha hacia el andador. (Si la lesión está en la pierna o pie izquierdo, transfiera primero la mano derecha seguida de la mano izquierda).

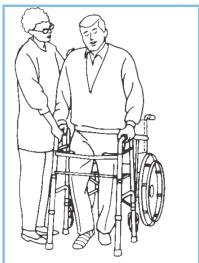

## marcha de tres puntos

(para caminar con el andador)

### Paso 1

Alinear la parte media de su pie con las patas posteriores del andador.



### Paso 2

Levante el andador hacia arriba y colóquelo cómodamente en frente de Ud., asegurándose que todas las patas estén apoyadas sobre el suelo.




### Paso 3

Camine cuidadosamente hacia el frente tomando un paso a la vez.



## instructions pour l'ambulateur

Détente ergonomique « à tirette » pour l'ouverture et la fermeture.

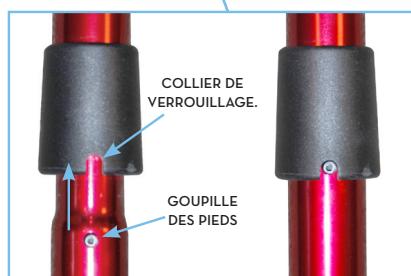


### AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT :

Votre ambulateur comporte des pieds pliables qui peuvent être fixés au cadre de l'ambulateur pour faciliter l'entreposage. Assurez-vous, avant l'utilisation, que les goupilles sont insérées dans les colliers de verrouillage tel qu'illustré ci-dessus.

## ajustement de la marchette

Avec votre bras prolongé vers le bas, la poignée devrait être à la hauteur du poignet. Votre main étant placé sur la poignée, votre coude devrait être fléchi 20 degré- 30 degré.

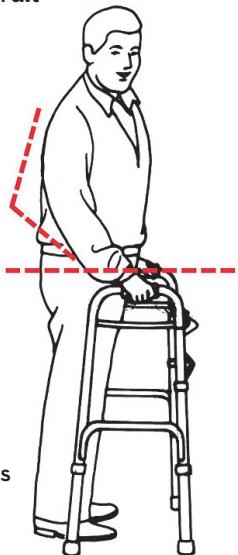

### CAUTION:


- Cordes Électriques
- Liquides sur le plancher
- Tapis
- Jouets & Débris
- Meubles
- Portes & Arrêts de porte
- Lacunes dans les planchers

### AUTRES PRÉCAUTIONS :

1. Seulement utiliser les roues sur les pattes avant ou sur chacune des quatre pattes avec les freins de roues arrière appropriées.
2. Ne pas pousser en avant un côté et puis l'autre côté sans soulever la marchette en premier.
3. L'utilisation des accessoires d'autres fabricants peut avoir comme conséquence un ajustement incorrect et peut même amener à tomber et/ou des blessures.
4. Ne jamais utiliser la marchette sur les escaliers ou les escalateurs.

## transfert de la chaise roulante à la marchette


S'assurer que les quatre roues sont barrées sur la chaise roulante, soulever votre corps en poussant vers le bas sur les appuis-bras et soigneusement transférer une main à la fois sur la marchette.

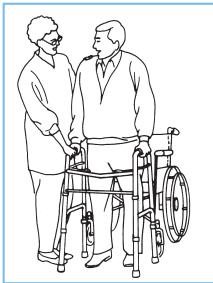

## transfert de la chaise roulante à la marchette

(avec des blessures d'extrémité inférieures à la jambe droite ou le pieds droit)

S'assurer que les quatre roues sont barrées sur la chaise roulante, soulever votre corps en poussant vers le bas sur les appuis-bras et soigneusement transférer premièrement la main gauche, après la main droite sur la marchette. (Si des blessures à la jambe gauche ou le pieds gauche transférer la main droite en premier, ensuite la main gauche.)

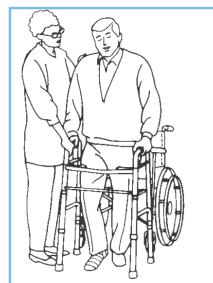

## trois-point-démarche

(pour marcher avec la marchette)

Enligner le milieu de votre pied avec les pattes arrières de la marchette.



Soulever la marchette et placer confortablement en avant de vous, et s'assurer que les quatre pattes sont sur le plancher.



Soigneusement marcher d'avant un pas à la fois.



## **lifetime limited warranty**

Your Drive brand product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the lifetime of the original consumer purchaser.

This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This Lifetime Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of years of dependable service.

In the event of a defect covered by this warranty, we will, at our option, repair or replace the device.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

If you have a question about your Drive device or this warranty, please contact an authorized Drive dealer.

**drive**  
[WWW.DRIVEMEDICAL.COM](http://WWW.DRIVEMEDICAL.COM)

© 2006 Medical Depot, Inc. All rights reserved.

Drive is a trademark of Medical Depot, Inc.

Port Washington N.Y. 11050 USA Made in China

## **garantía limitada de por vida**

Su producto marca Drive está garantizado de por vida del comprador-consumidor original de no tener defectos en los materiales y la fabricación.

Este aparato fue construido de acuerdo a estándares rigurosos y cuidadosamente inspeccionado previo a su envío. Esta Garantía Limitada de por Vida es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la fabricación de nuestros productos y nuestra seguridad para el consumidor dada por años de servicios confiables.

En el caso de un defecto cubierto por esta garantía, repararemos o reemplazaremos el aparato, de acuerdo a nuestra opinión.

Esta garantía no cubre fallas del aparato debidas a mal uso o negligencia por parte del propietario o por el uso y desgaste normales. Esta garantía no se extiende a los componentes no durables, tales como los accesorios de goma, rueditas y mangos que están sujetos a desgaste normal y necesitan reemplazo periódico.

Si usted tiene preguntas acerca de su aparato Drive o esta garantía, por favor contacte a un representante autorizado de Drive.

**drive**  
[WWW.DRIVEMEDICAL.COM](http://WWW.DRIVEMEDICAL.COM)

©2006 Medical Depot, Inc. Todos los derechos reservados.

Drive es marca registrada de medical depot, Inc.

Port Washington NY 11050 USA Hecho en China

## garantie à vie, limitée

Ce produit Drive est garanti d'être exempt de tout défaut de matériau, de fabrication ou de main d'oeuvre, auprès du propriétaire original et ce, pour la durée de la vie de celui-ci.

Cet appareil a été fabriqué selon des normes de qualité rigoureuses et inspecté avant de quitter l'usine. Cette garantie à vie limitée, est un témoignage de la confiance que nous portons aux matériaux, à la main d'oeuvre, ainsi qu'aux procédés de fabrication requis pour produire nos appareils afin qu'ils puissent vous assister de manière fiable et sécuritaire pendant de nombreuses années.

Dans l'éventualité où un bris devait survenir en cours d'utilisation de l'un de nos produits, nous nous engageons, à notre discrétion, à assurer selon le cas, la réparation ou le remplacement de l'appareil.


Cette garantie ne peut être invoquée dans les cas d'usage inappropriate de l'appareil, en cas de négligence ou d'usure normale. Cette garantie ne couvre pas les pièces qui, de par leur nature, ont une durée de vie plus courte, tel que les embouts de caoutchouc, poignées de mousse, roues et pneus, qui doivent être périodiquement remplacés.

Pour toute question sur cet appareil ou sur sa garantie, veuillez svp, contacter votre détaillant autorisé de produits Drive.

**drive**  
[WWW.DRIVEMEDICAL.COM](http://WWW.DRIVEMEDICAL.COM)

© 2006 Medical Depot, Inc. Tous droits réservés.  
Drive est une marque de commerce de Medical Depot, Inc.  
Port Washington, NY 11050 USA Fabriqué en Chine

www.drivemedical.com

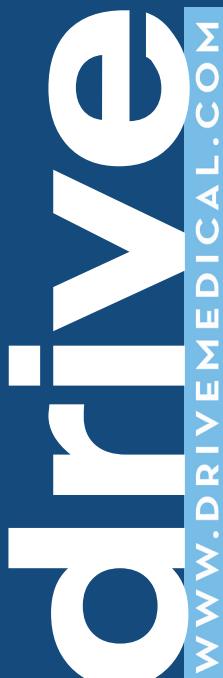

[www.drivemedical.com](http://www.drivemedical.com)

drive  
www.DRIVEMEDICAL.COM

[www.drivemedical.com](http://www.drivemedical.com)

drive  
www.DRIVEMEDICAL.COM